


ACCUVAC Lite

Einfach stark – Absaugung leicht gemacht



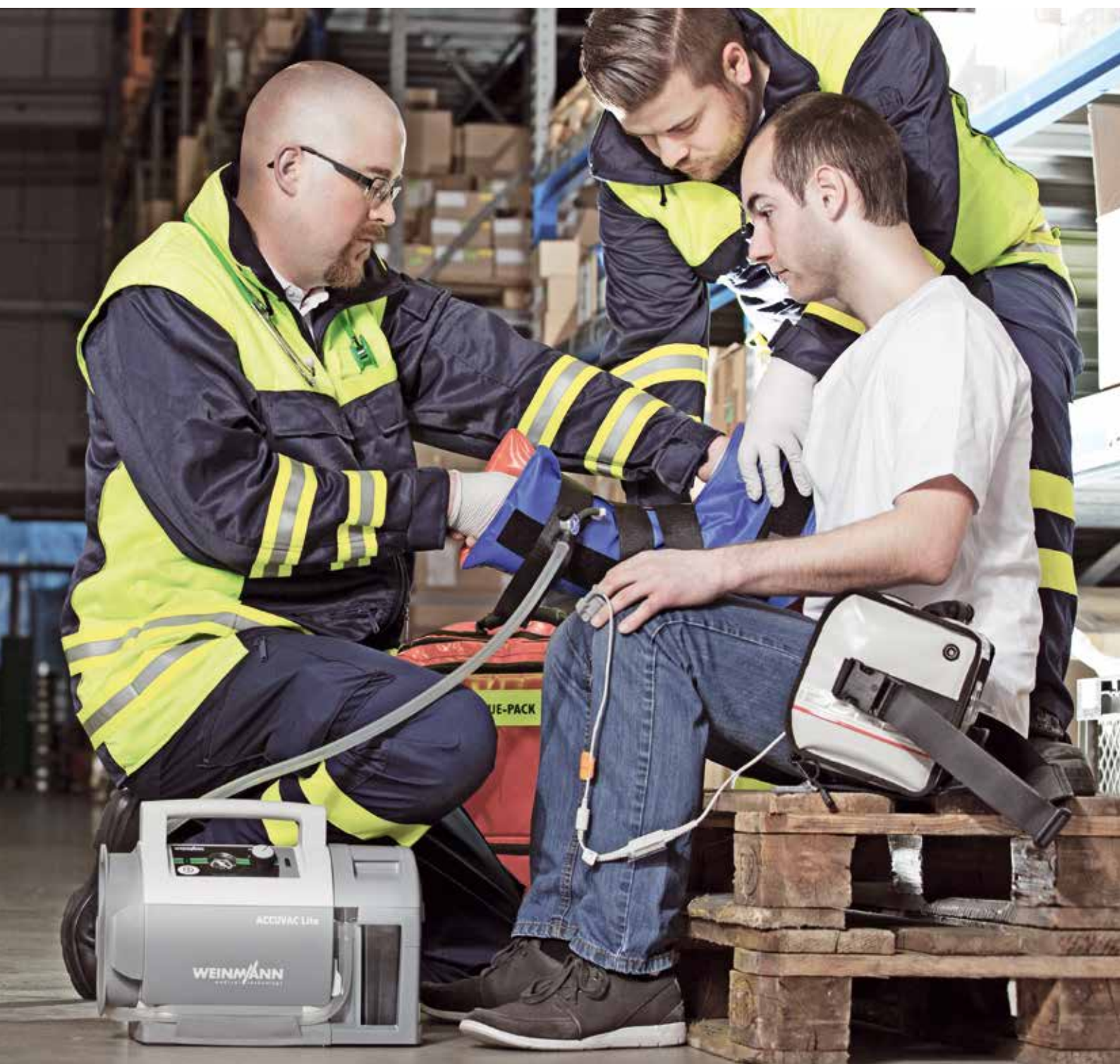

ACCUVAC Lite

Absaugung leicht gemacht

Die Atemwege schnell und effektiv freizuhalten ist in Notfallsituationen überlebenswichtig. ACCUVAC ist seit Jahrzehnten der Standard für Atemwegsabsaugung. Bei der Absaugung des Mund- und Rachenraumes eines Patienten bzw. bei einer endotrachealen oder bronchialen Absaugung sorgt ACCUVAC Lite für freie Atemwege. Die hohe Saugleistung und einfache Handhabung garantieren eine schnelle und effektive Therapie im Notfalleinsatz oder in der Klinik.

Breites Einsatzgebiet, flexible Handhabung

Der Unterdruckbereich der ACCUVAC Lite kann durch den leicht bedienbaren Vakuumregler stufenlos eingestellt und angepasst werden. Damit kann sie sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Kleinkindern angewendet werden. Neben der Absaugung der Atemwege kann ACCUVAC Lite auch für die Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Variabel einsetzbar
- Sicher und hygienisch
- Intuitiv bedienbar und robust
- EN 1789-konforme, sichere Unterbringung mit Wandhalterung im Fahrzeug



Komfortable Anwendung, großes Einsatzspektrum

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Stufenlos einstellbare Unterdruckregulierung durch leicht bedienbaren Vakuumregler bis -0,8 bar
- Unterdruck am Manometer ablesbar
- Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Einweg-Bakterienfilter und Überlauf-sicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Akkuwechsel: Einfach, von außen und ohne Werkzeug durch den Anwender möglich
- Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien
- Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Optimale Bedienbarkeit im Rettungsalltag

- Optimale Unterbringung des Absaugschlauchs in seitlicher Schlauchhalterung
- Einhand-Entriegelung per Tastendruck aus der Wandhalterung
- Kompatibel mit bereits bestehender ACCUVAC-Wandhalterung
- Optional mit großer Zubehörtasche, Schutztasche und/oder Tragegurt

Für jeden Patiententyp und jeden Einsatz

- Absaugen von Sekret und Nahrungsbestandteilen
- Endotracheale und bronchiale Absaugung
- Für den Einsatz bei Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen geeignet
- Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen



ACCUVAC Lite

mit Mehrbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung, WM 11720



ACCUVAC Lite


mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung, WM 11715 und Schutztasche WM 11692

 Service Hotline
040 88 18 96 122

Servicedaten: ACCUVAC Lite

Herstellergarantie	2 Jahre
STK Intervall	STK-frei
Wartungsintervall	wartungsfrei
Funktionskontrolle	manuell
Akuwechsel	einfach, von außen, ohne Werkzeug
Akku	wartungsfrei, keine Kalibrierung notwendig
Umrüstung Einwegsystem/ Mehrwegsystem	einfach, ohne Werkzeug

Intuitive Bedienung für höchste Sicherheit

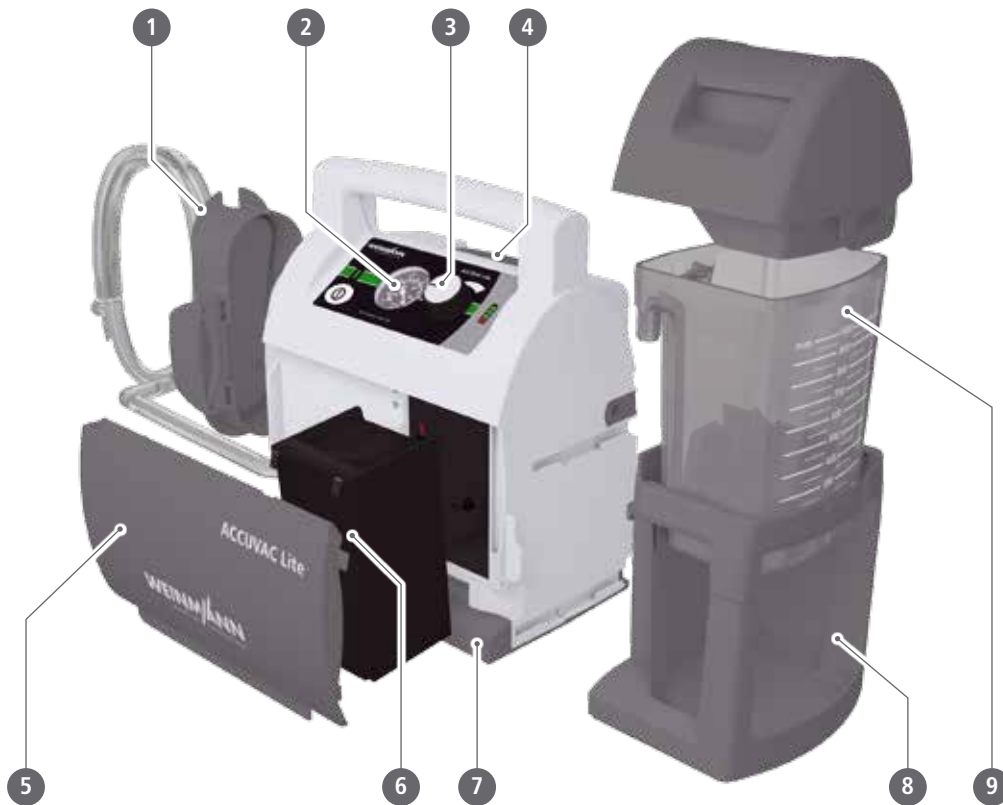

1. Schlauchaufwicklung

Zur optimalen Unterbringung

2. Manometer

Zum Ablesen des Unterdruckes

3. Leicht bedienbarer Vakuumregler

Stufenlos einstellbare Unterdruckregulierung

4. Entriegelung für Wandhalterung

Einhand-Entriegelung per Tastendruck

5. Akkufachabdeckung

Ohne Werkzeug zu öffnen. Somit ist der Akku schnell erreichbar und auswechselbar

6. Bleiakku

Schnelle Aufladung für Akkustatus bis 80%

7. Gerätefuß mit Schlauchführung

8. Behälteraufnahme

Mehr Sicherheit für alle Behältersysteme aufgrund stoßsicherer Materials

9. Mehrwegsekretbehälter, 1000 ml

Mit Überlaufschutz durch Einweg-Bakterienfilter. Ist der Behälter voll, stoppt die ACCUVAC Lite die Absaugung.



Technische Daten

ACCUVAC Lite

Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG	Ila
RoHS-Konformität nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)	Ja
Klassifikation nach EN ISO 10079-1	High vacuum/high flow
Angewandte Normen	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12, EN 60601-1-11
Abmessungen (B x H x T)	<ul style="list-style-type: none"> mit Behältersystem 370 x 277 x 146 mm mit Behältersystem und Zubehörtasche 370 x 277 x 152 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> Gerät mit Akku, ohne Behältersystem und Aufnahme 4,6 kg Mehrwegbehältersystem mit Aufnahme für Mehrwegbehältersystem 1,00 kg Einwegbehältersystem mit Aufnahme für Einwegbehältersystem 0,65 kg
Betrieb: Temperaturbereich	-5 °C bis +50 °C
Transport/Lagerung	-40 °C bis +70 °C
Maximale Stromaufnahme	3,7 A
Nennspannung	12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)
Saugleistung am Geräteeingang (ohne Behältersystem) bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa	26 l/min
Saugleistung am Eingang Mehrwegbehältersystem bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa	23 l/min
Vakuumeinstellung	Über stufenlosen Vakuumregler
Betriebsart	S2 45 min
Schutzgrad	IP34D
Akku-Typ	Blei
Akku	<ul style="list-style-type: none"> Ladezeit Akkustatus 80 %: 2 h 75 min Akkustatus 100 %: 14 h Lebensdauer Ca. 400 Ladezyklen Akkubetriebsdauer 40 min (bei ununterbrochenem Betrieb mit vollem/neuem Akku)
Sekretbehälter-Volumen	1000 ml
Mehrweg-Absaugerschlauch	10 mm ID, 1300 mm Länge
Einweg-Absaugerschlauch	7 mm ID, 1800 mm Länge

CE 0124



Technische Angaben und Änderungen vorbehalten.

 Designed in Germany

Bestellvarianten

ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem*	WM 11700
ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem* Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	WM 11710
ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem* Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung	WM 11720
ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem* und Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	WM 11730
ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem* und Zubehörtasche	WM 11740
ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem	WM 11705
ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	WM 11715
ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung	WM 11725
ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem und Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	WM 11735
ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche	WM 11745

*Bitte beachten Sie, dass das Mehrwegbehältersystem mit einem Einweg-Bakterienfilter ausgestattet ist

Zubehör und Ersatzteile

Verbrauchsmaterial

- | | |
|--|----------|
| 1. Absaugbeutel Serres®
1.000 ml, mit hydrophobem Filter und Geliemittel
(Verpackungseinheit: 32 Stück im Karton) | WM 17800 |
| 2. Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip
für die Verwendung mit dem Einwegsystem,
180 cm Länge, 7 mm ID, auch erhältlich
in Sets à 10, 20, 32 und 50 Stück | WM 10778 |
| 3. Mehrweg-Absaugschlauch
130 cm Länge, 10 mm ID, auch erhältlich in
Sets à 10, 20 und 50 Stück | WM 10662 |
| 4. Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch
10 mm ID auch erhältlich in
Sets à 10, 20 und 50 Stück | WM 10666 |
| 5. Set Einweg-Bakterienfilter
für Mehrwegsekretbehälter Set à 10 Stück | WM 17830 |



Zubehör für ACCUVAC Lite

- | | |
|---|----------|
| 6. Zubehörtsache
Akkufachabdeckung für Zubehörtsache
wird benötigt (WM 11714) | WM 11691 |
| 7. Schutztasche | WM 11692 |
| 8. Tragegurt | WM 11693 |
| 9. 12-V-Verbindungsleitung | WM 10650 |
| 10. Netz- und Ladegerät
für 100 V bis 240 V Wechselspannung auf
Gerätestecker ACCUVAC, inkl. Netzanschlussleitung
nach EN 50075 („Europastecker“) | WM 2620 |
| 11. Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem
bestehend aus:
• Set, Mehrwegbehältersystem (WM 17821)
• Aufnahme für Mehrwegbehältersystem (WM 11654) | WM 17820 |
| 12. Umrüstsatz Einwegbehältersystem
bestehend aus:
• Aufnahme für Einwegbehältersystem (WM 11754)
• Vakuumschlauch für Behälter Serres® (WM 11761)
• Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790) | WM 17825 |
| 13. Anbauset Geräteschiene mit 2 Adaptern
zusätzlich benötigt zur Fixierung an Geräteschiene | WM 15805 |
| 14. Wandhalterung für ACCUVAC
zur direkten Wandmontage, inklusive Montageset | WM 15208 |
| 15. Halblech für Geräteschiene
zusätzlich benötigt zum Einhängen in Geräteschiene | WM 15845 |
| Umrüstsatz Zubehörtsache bestehend aus:
• Akkufachabdeckung für Zubehörtsache (WM 11714)
• Zubehörtsache (WM 11691) | WM 17839 |
| Wandhalterung für Netz- und Ladegerät | WM 15844 |





Ersatzteile für Mehrwegsystem

1. Oberteil des Sekretbehälterdeckels,	WM 11657
2. Filterhalter	WM 11661
3. O-Ring für Filterhalter	WM 11663
4. Bakterienfilter	
5. Unterteil des Sekretbehälterdeckels	WM 11658
6. Schwimmerkugel	WM 11662
7. Mehrwegsekretbehälter 1.000 ml	WM 11653
8. Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID	WM 10662
9. Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID	WM 10666
10. Aufnahme für Mehrwegbehältersystem	WM 11654
Sekretbehälterdeckel, komplett bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 6	WM 17822
Set, Mehrwegbehältersystem bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 9	WM 17821
Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 10	WM 17820

Ersatzteile für Einwegsystem Serres®

Sekretbehälter Serres®, komplett bestehend aus:	WM 10790
• Sekretbehälter, 1.000 ml (WM 10775)	
• Absaugbeutel	
• Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10778)	
Sekretbehälter Serres®, 1.000 ml	WM 10775
Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres®	WM 11761
Aufnahme für Einwegbehältersystem	WM 11754
Set Einwegbehältersystem bestehend aus:	WM 17826
• Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres® (WM 11761)	
• Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)	
Winkelstück am Sekretbehälter Serres®, Mehrweg	WM 10799

Ersatzteile für ACCUVAC Lite

Set Entriegelungstaste	WM 17837
Bleiakku	WM 10747
Akkufachabdeckung (ohne Ösen für Zubehörtasche)	WM 11704
Schlauchaufwicklung	WM 11664
Gerätefuß	WM 11677

Simply Professional

WEINMANN Emergency ist ein international tätiges Medizintechnik-Unternehmen in Familienbesitz. Mit unseren mobilen Systemlösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben. In engem Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Sanitätsdiensten von Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung und Defibrillation. Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany.

Deutschland

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohösestraße 12
22525 Hamburg
Germany

T: +49 40 88 18 96-0 Zentrale
F: +49 40 88 18 96-480 Zentrale
T: +49 40 88 18 96-120 Kundenservice
T: +49 40 88 18 96-122 Technischer Service
E: info@weinmann-emt.de

Zentrum für Produktion, Logistik und Service

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

China

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

Frankreich

WEINMANN Emergency France SARL – Paris-Igny
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Russland

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg
T: +7 812 633 30 82 • info@weinmann-emt.ru

Singapur

Weinmann Singapur PTE, Ltd.
T: +65 65 09 44 30 • sales-singapore@weinmann-emt.de

Spanien

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
T: +34 91 79 01 137 • sales-spain@weinmann-emt.de